


mb-Spine

SLR System

SLR system



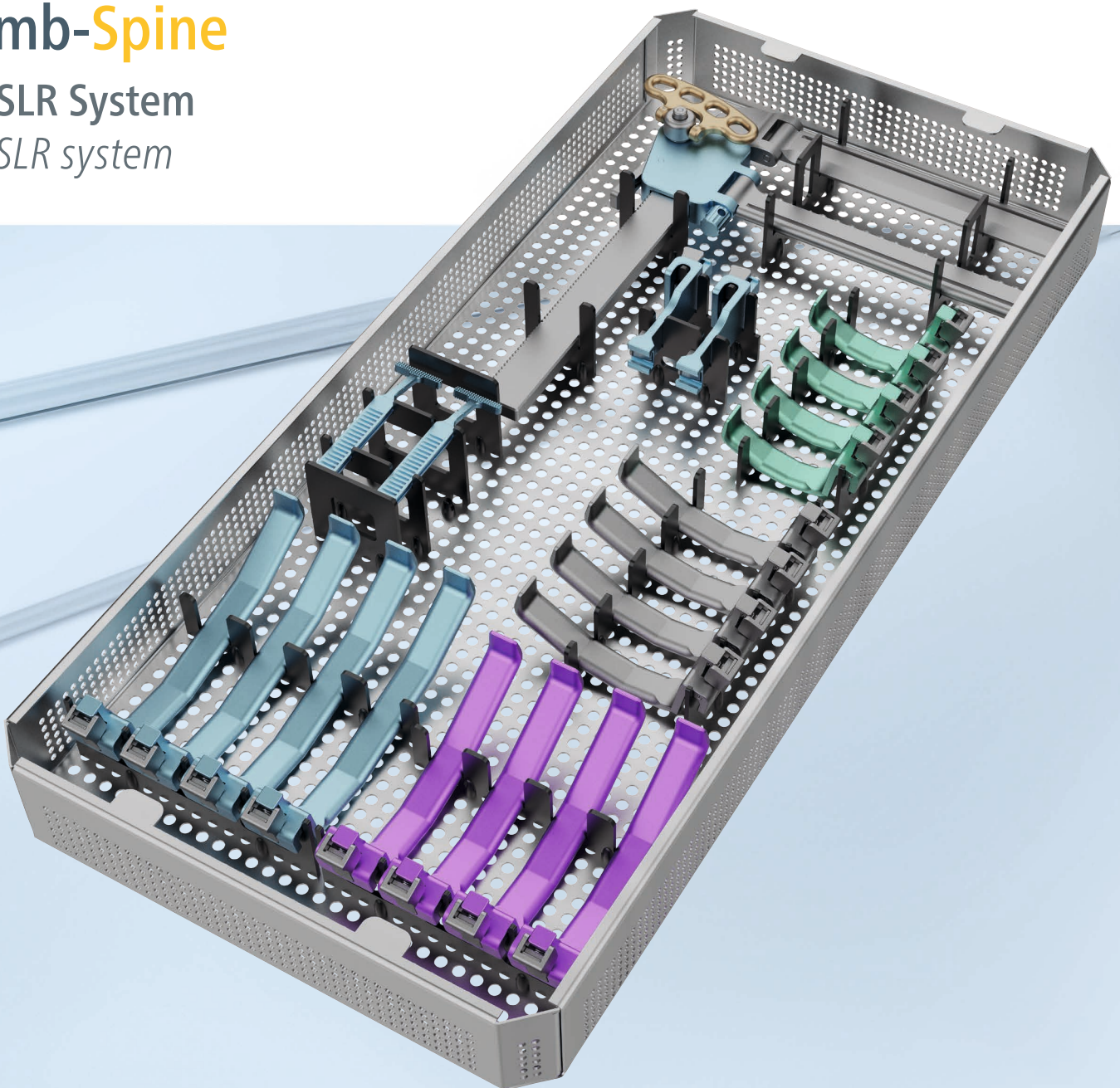

Ihre Adresse für chirurgisches Qualitätsinstrumentarium „Made in Germany“, hergestellt an unserem Standort in Emmingen bei Tuttlingen.

Die Produkte von medical bees sind CE-zertifiziert und tragen das CE-Kennzeichen. Für Informationen zu länderspezifischen Zulassungen wenden Sie sich bitte an sales@medical-bees.de.

Medical bees steht für höchste Qualität, Schnelligkeit und Effizienz. Wir finden für Sie die technisch und wirtschaftlich optimalste Lösung. Sprechen Sie uns an, um das komplette medical bees Produktprogramm kennenzulernen! Weitere Informationen erhalten Sie auf: medical-bees.de oder per E-Mail über sales@medical-bees.de.

Your address for quality surgical instruments 'Made in Germany', manufactured at our site in Emmingen near Tuttlingen.

The products from medical bees are CE-certified and labelled with the CE mark. For information on country-specific registrations, please contact sales@medical-bees.de.

Medical bees stands for the highest quality, speed and efficiency. We will find the most technically and economically optimised solution for you. Contact us to find out more about the complete medical bees product programme! Further information is available at medical-bees.de or by e-mail at sales@medical-bees.de.

1 Funktionsübersicht SLR System	3
<i>Functional overview SLR system</i>	
2 SLR System	4
<i>SLR system</i>	
3 SLR System Komponenten	5
<i>SLR system components</i>	
4 SLR-Valven	6-7
<i>SLR-Blades</i>	

made in GERMANY

SLR System


SLR system



Das SLR System aus Titan

- Das komplette System besteht aus einem Retraktor, unilateralem Valven Zubehör und Valven in unterschiedlichen Längen
- Schmales Design der Valven zur Gewebeschonung und extra lange Valven sind verfügbar
- Ermöglicht eine hervorragende Exposition zu Operationen an der Wirbelsäule und Laminektomien
- Farbige Valven zur leichteren Identifizierung der Tiefe/Länge

The SLR system in titanium

- The complete system consists of a retractor, unilateral blade attachments and blades in different lengths
- Special small design of blades for less tissue exposure and extra long blade available
- Allows an excellent exposure during the spine procedures and laminectomies
- Coloured blades for easier identification of depth/length

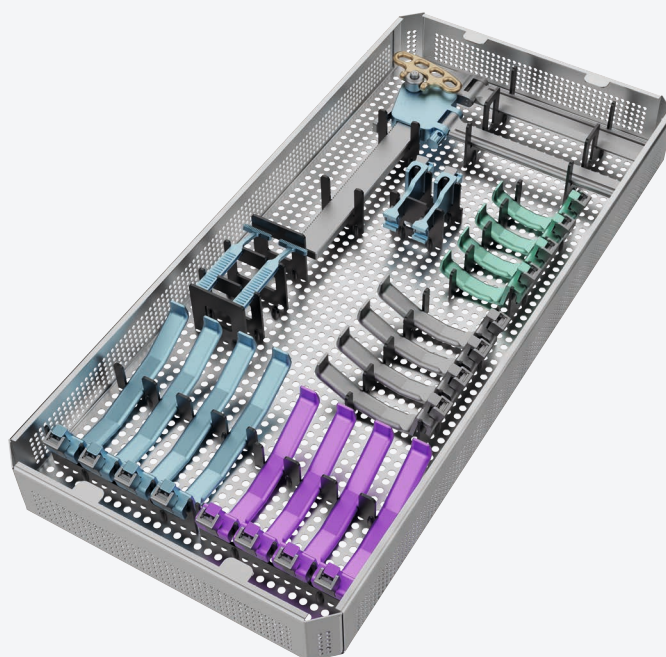

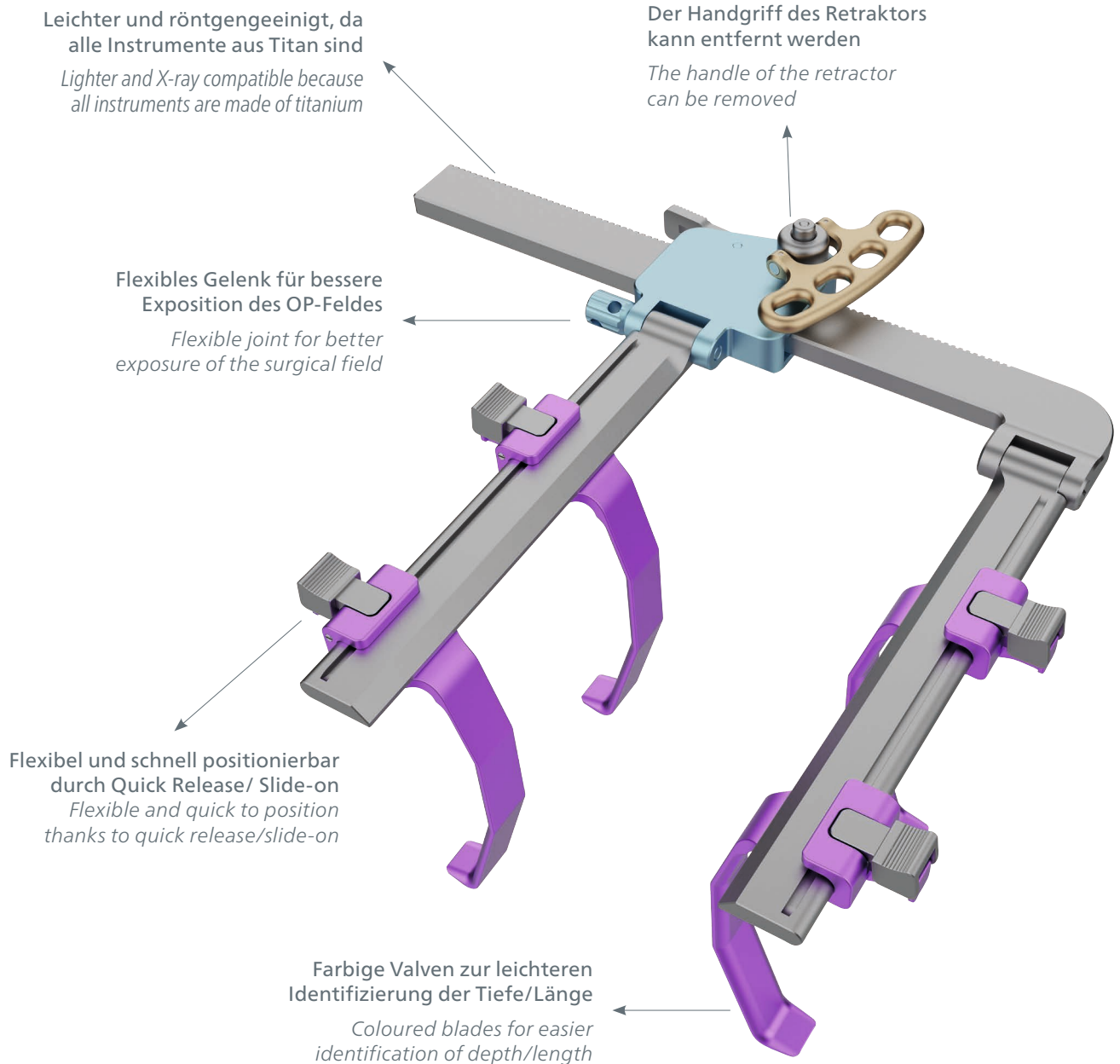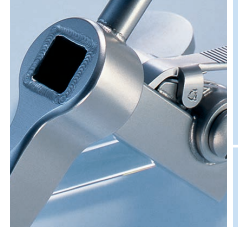

Das SLR System steht für Qualität und Langlebigkeit.

- Alle Instrumente sind aus Titan und im Siebkorb sicher transportier- und sterilisierbar
- Der Griff des Retraktors kann nach der Fixierung entfernt werden, um ein schlankeres Design und mehr Platz während der Operation zu haben
- Die Valven lassen sich dank Quick Release/Slide-on einfach positionieren und fixieren
- Die Valven lassen sich frei entlang des Retraktorarms verschieben und bei Bedarf neu positionieren

The SLR system stands for quality and durability.

- All instruments in titanium and can be safely transported and sterilised in the tray
- The handle of the retractor can be removed once fixed to allow a slimmer design and more space for handling during operations
- The blades can be easily positioned and fixed in place thanks to quick release/slide-on
- The blades can be positioned freely along the retractor arms and repositioned whenever needed

3

4



SLR System | SLR system




 medicalbees
System-driven Surgery

TI

Titan | Titanium

SST

Edelstahl | Stainless steel

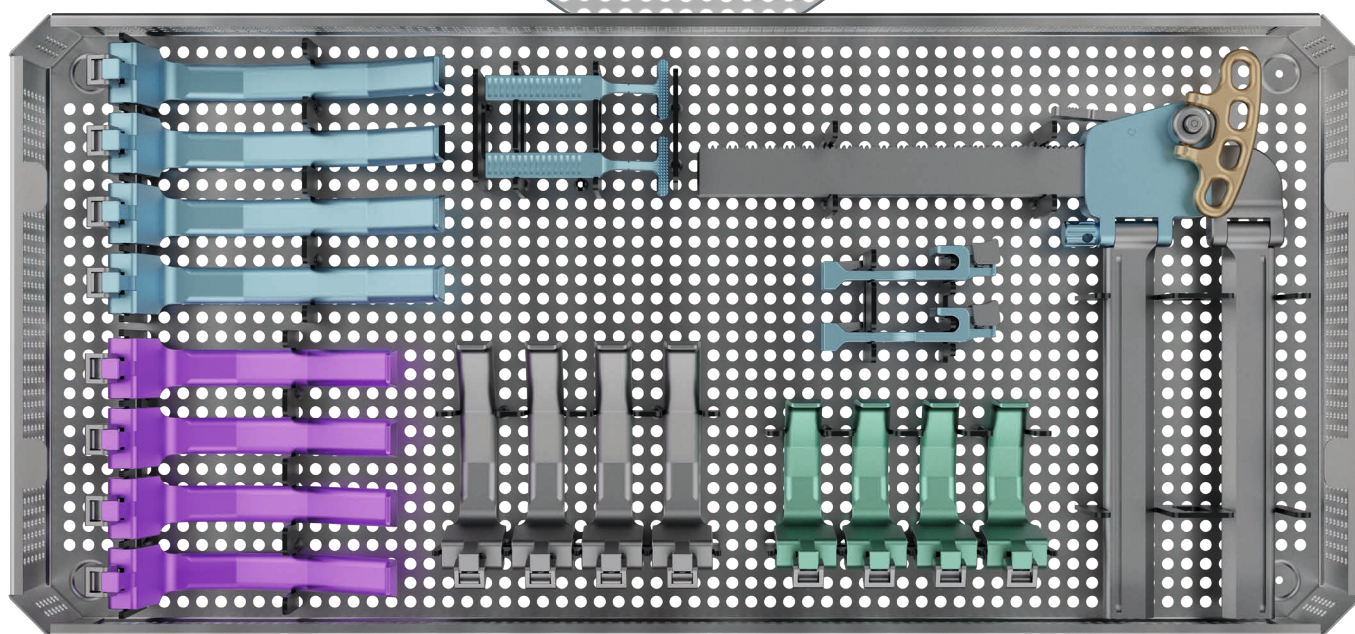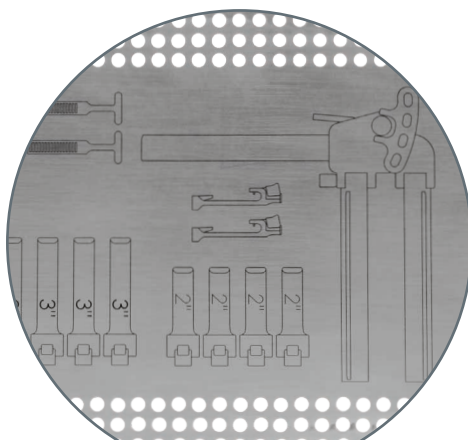

SLR System mit Siebkorb und Deckel
SLR system mit tray and cover

MB1-10-761-00		Komplettes SLR System Titan einschließlich der folgenden Komponenten: Complete SLR System Titanium including the following components:	
System-Inhalt System content	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-10	SLR Spreizer alleine SLR spreader alone	TI	1
MB1-10-761-15	SLR Unilateral Valve Zubehör SLR Unilateral Blade Attachment	TI	2
MB1-10-761-17	SLR-T-Valve SLR-T-Blade	TI	2
MB1-10-761-20	SLR Valve Klein 2" SLR blade small 2"	TI	4
MB1-10-761-25	SLR Valve Mittel 3" SLR blade medium 3"	TI	4
MB1-10-761-30	SLR Valve groß 4" SLR blade large 4"	TI	4
MB1-10-761-35	SLR Valve extra groß 4 3/4" SLR blade extra large 4 3/4"	TI	4
MB1-10-761-90	SLR Siebkorb SLR tray	SST	1




Titan | Titanium

Ti



Edelstahl | Stainless steel

SST

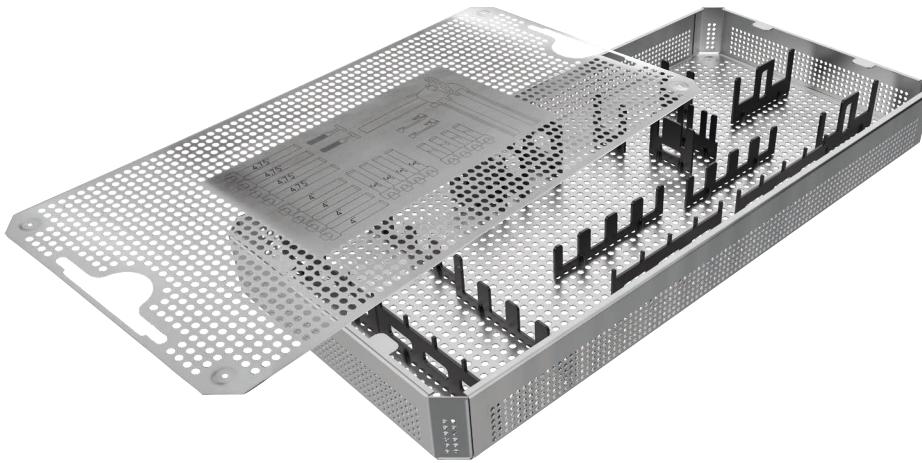


SLR Siebkorb mit Deckel
SLR tray and cover

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-90	SLR Siebkorb SLR tray	SST	1

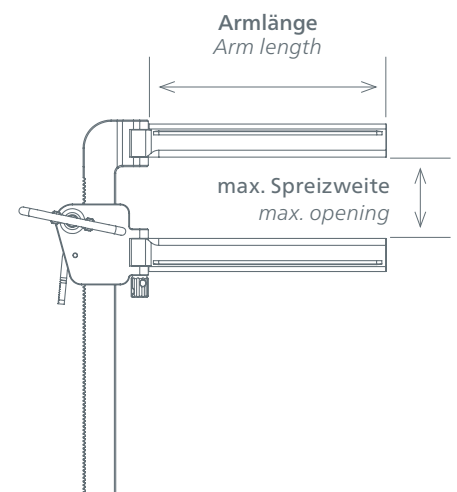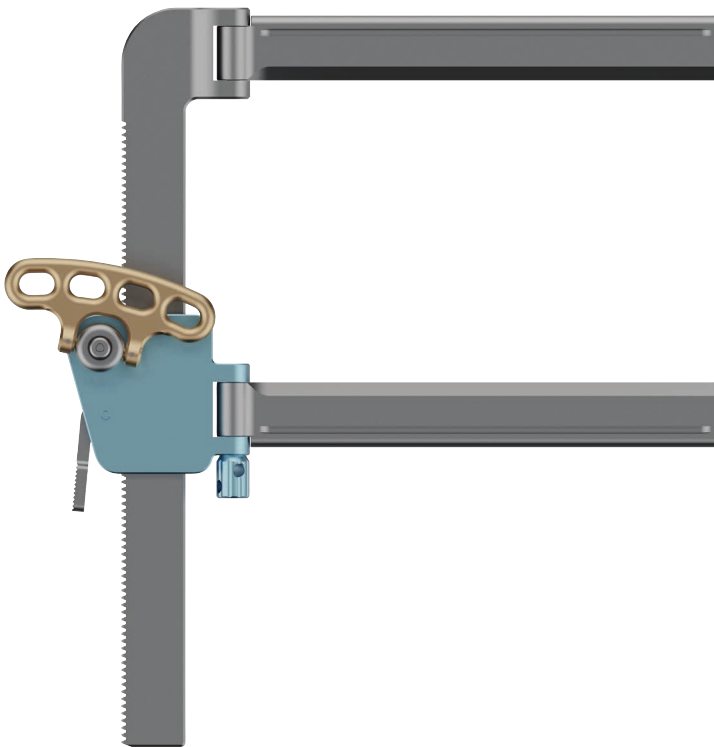


SLR Spreizer
SLR spreader

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Max. Spreizweite Max. opening	Armlänge Arm length	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-10	SLR Spreizer alleine SLR spreader alone	230 mm	153 mm	Ti	1

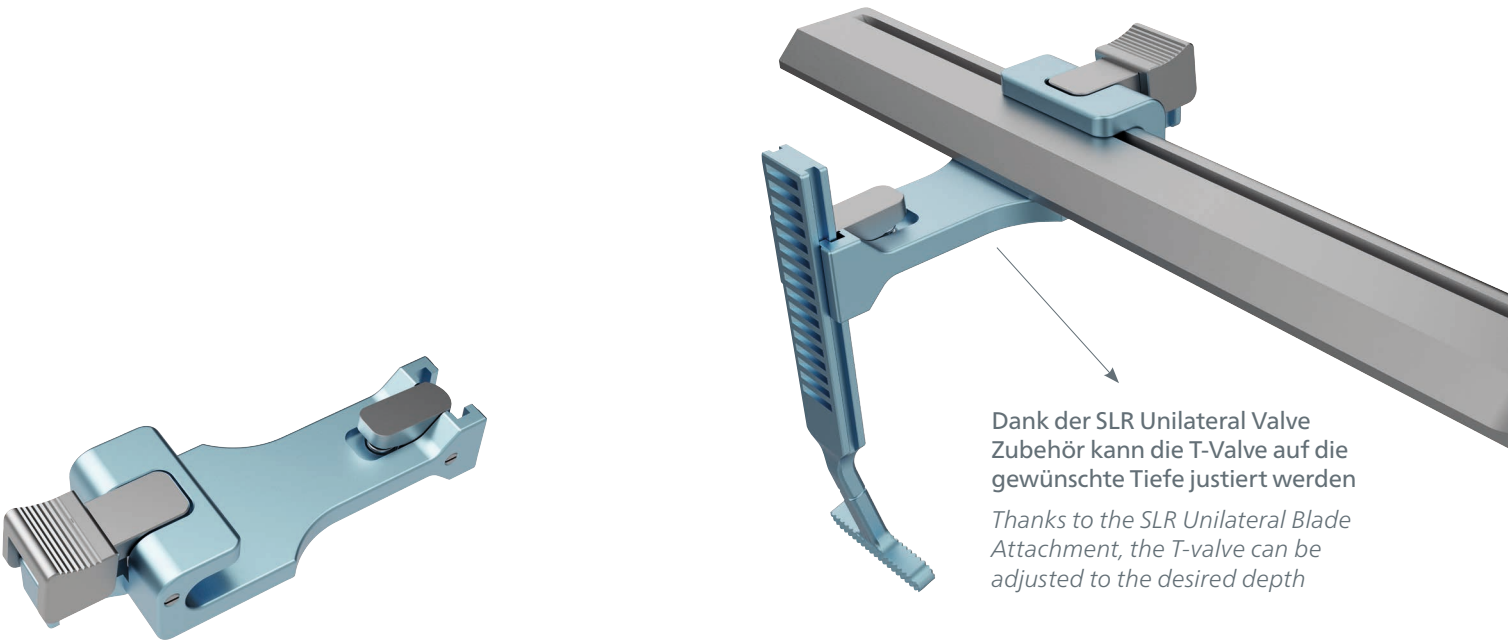



SLR Unilateral Valve Zubehör
SLR Unilateral Blade Attachment

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-15	SLR Unilateral Valve Zubehör SLR Unilateral Blade Attachment	Ti	1

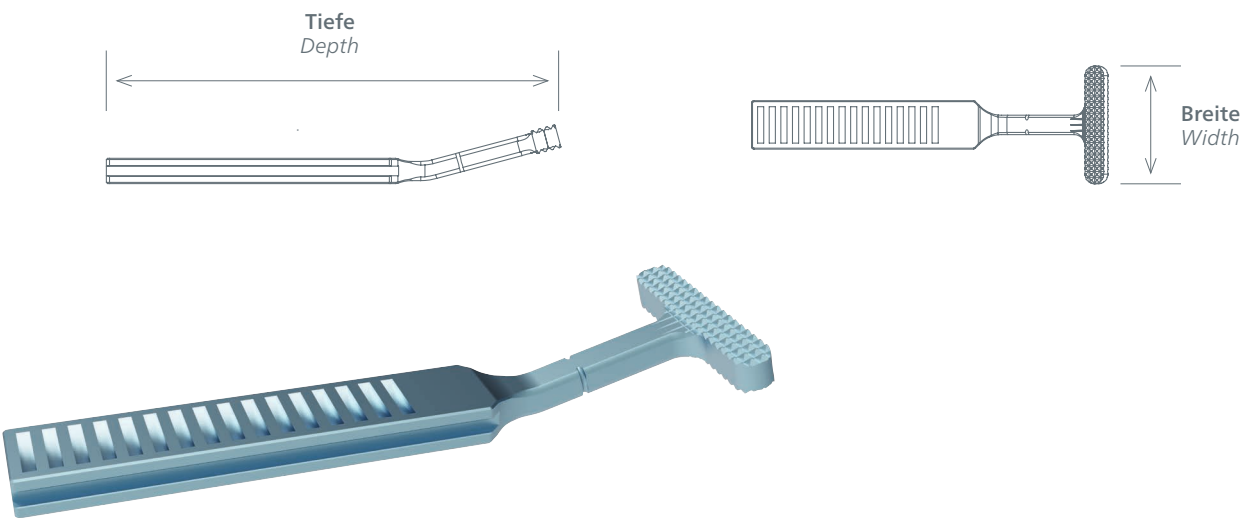


T-Valve
T-blade

Artikelnummer Article number	Beschreibung Description	Tiefe Depth	Breite Width	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-17	SLR-T-Valve SLR-T-Blade	74 mm	24 mm	Ti	1

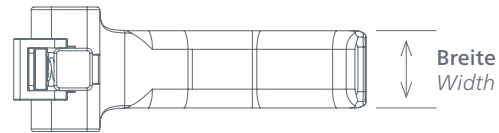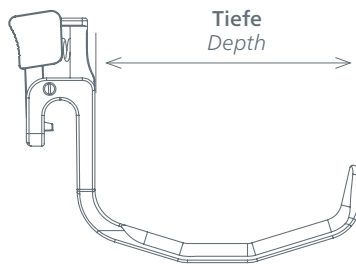

SLR Valve Klein 2"
SLR blade small 2"

Artikelnummer Article number	Tiefe Depth	Breite Width	Farbe Color	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-20	53 mm 2"	15 mm		TI	1

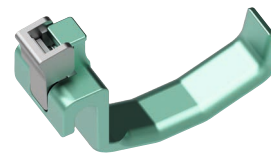


SLR Valve Mittel 3"
SLR blade medium 3"

Artikelnummer Article number	Tiefe Depth	Breite Width	Farbe Color	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-25	78 mm 3"	15 mm		TI	1




SLR Valve groß 4"
SLR blade large 4"


Artikelnummer Article number	Tiefe Depth	Breite Width	Farbe Color	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-30	104 mm 4"	15 mm		TI	1

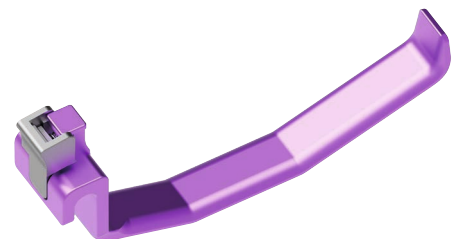

SLR Valve extra groß 4 3/4"
SLR blade extra large 4 3/4"

Artikelnummer Article number	Tiefe Depth	Breite Width	Farbe Color	Material Material	Menge Quantity
MB1-10-761-35	123 mm 4 3/4"	15 mm		TI	1

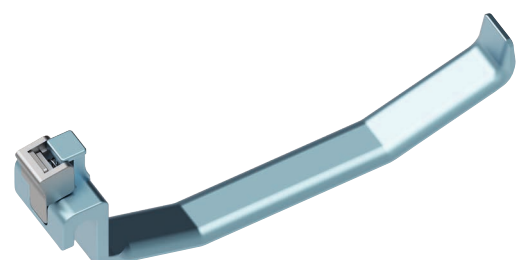

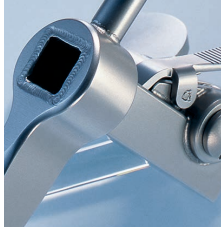

Das könnte Sie auch interessieren | This could also interest you



Power tools
Power tools




Kopfhalterungssysteme
Cranial stabilization systems



Spine System
Spine systems

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Ganzen noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification. Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.

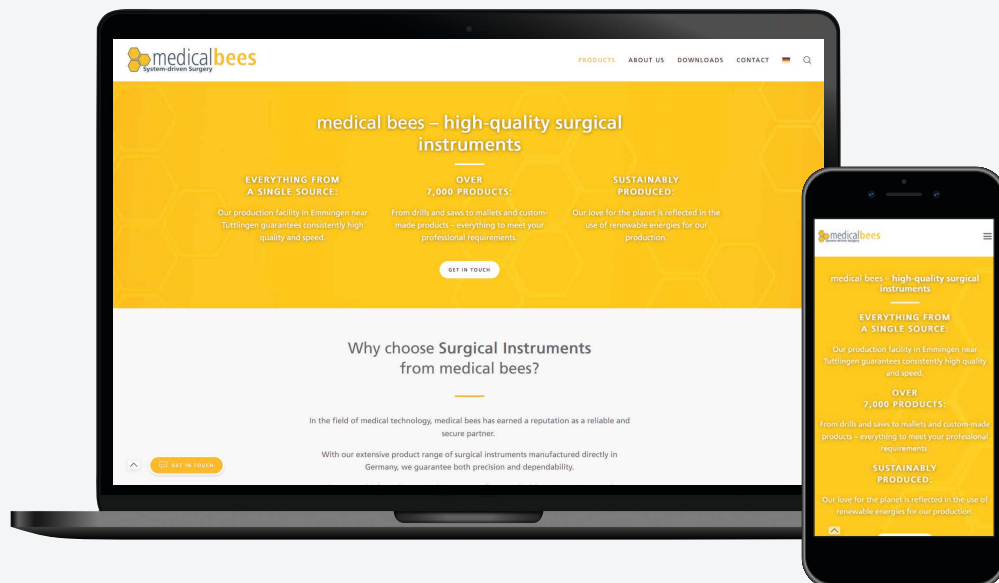

Immer up to date

Die aktuellen Informationen zu unseren über 7000 verschiedenen Produkten finden Sie immer auf unserer Webseite.
Besuchen Sie: www.medical-bees.de

Always up to date

You can find the latest information about our over 7000 different products on our website.
Visit: www.medical-bees.de